


Kit Cateter Longa Permanência 14 Fr Split

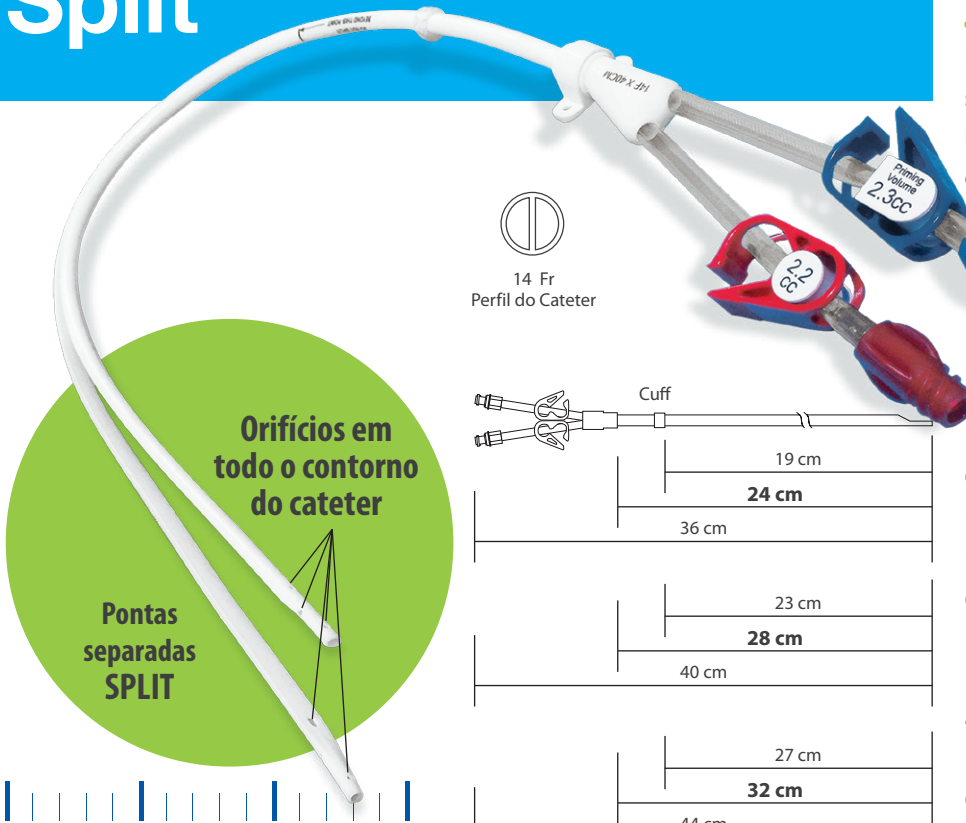

14 Fr
Perfil do Cateter

Orifícios em todo o contorno do cateter


Pontas separadas SPLIT

Por ser um cateter de pontas separadas (SPLIT) permite fluxos independentes com captação e devolução em 360°.

Possui baixa taxa de recirculação, diminuindo assim a ocorrência de obstrução do cateter e colapamento do mesmo.

O **Cateter Duplo Lúmen Longa Permanência 14 Fr Split para Hemodiálise** é um produto médico de uso único, invasivo. Este cateter possui dois lúmens e estabelece uma linha de acesso vascular central, auxiliando assim, no tratamento de hemodiálise em pacientes portadores de insuficiência renal crônica ou aguda. Pode ser usado para hemodiálise, nutrição parenteral, infusão endovenosa de líquidos, drogas, sangue e seus derivados. Pode também, ser usado para retirada frequente de amostras de sangue para exames laboratoriais e medição de pressão internas e intracavitárias. Fabricado em silicone, um material biocompatível e radiopaco para uma perfeita visualização aos raios X. Devido a este material, os cateteres apresentam uma grande flexibilidade, resistência e durabilidade. Sua maciez dificulta dobras nos locais de punção.

Para aumentar o conforto do paciente, o corpo do cateter foi projetado de forma reta constituído de um material termossensível. Essa característica deixa o cateter menos propenso a dobras. Sua superfície lisa e regular diminui a agregação de plaquetas.

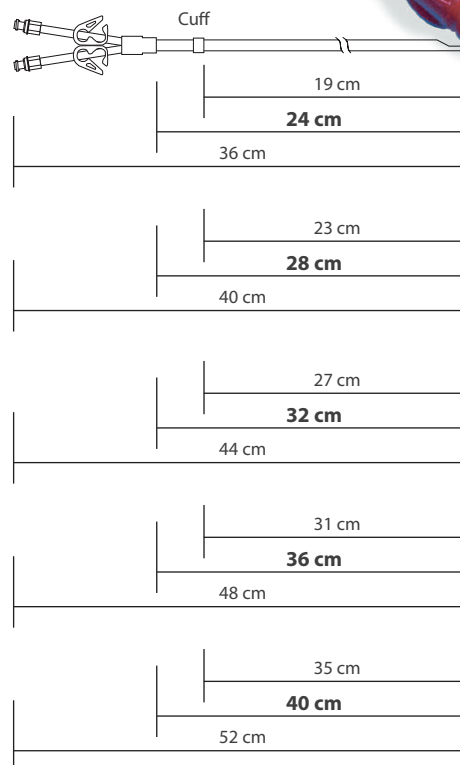

MEDIDAS

- 14 Fr x 24 cm
- 14 Fr x 28 cm
- 14 Fr x 32 cm
- 14 Fr x 36 cm
- 14 Fr x 40 cm

O KIT CONTÉM

- 1 Cateter em Silicone Duplo Lúmen Longa Permanência 14 Fr Split para Hemodiálise
- 1 Fio guia 0,035" x 70 cm com dispensador One Step Advancer
- 1 Agulha 18 Ga x 7 cm para introdução de fio guia
- 2 Tampas latex-free para injeção com rosca luer
- 1 Bisturi descartável com lâmina nº 11
- 1 Seringa de Raulerson (valvulada) para introdução de fio guia
- 2 Dilatadores de vaso (12 Fr x 6" e 14 Fr x 6")
- 1 Introdutor divisível 15 Fr com dilatador
- 1 Seringa de 5ml com agulha hipodérmica 30 x 0,7 mm
- 1 Tunelizador

REGISTRO ANVISA: 10196320060